

人CEA细胞黏附分子6酶联免疫吸附测定试剂盒

Human CEACAM-6/CD66c ELISA Kit

本产品需冰袋运输。保存于4℃，保质期6个月；保存于-20℃，保质期12个月。

产品参数

货号	HJ417
规格	96次
检测范围	31.25 pg/mL~2,000 pg/mL
敏感性	7 pg/mL
特异性	系统和其它因子无交叉反应
样本类型	人血清、血浆、体液、组织匀浆或细胞培养上清

产品简介

本试剂盒采用双抗体夹心 ELISA 法检测样品中人 CEACAM-6 的浓度。人 CEACAM-6 捕获抗体已经预包被于酶标板上，当加入样品或标准品时，其中的人 CEACAM-6 会与捕获抗体结合，而其它游离成分则会通过洗涤被除去。接着，再加入生物素标记的人 CEACAM-6 抗体后，抗人 CEACAM-6 抗体与人 CEACAM-6 结合，形成夹心的免疫复合物，其它游离成分则通过洗涤被除去。随后加入酶复合物，生物素与酶复合物特异性结合，这样酶复合物上的 HRP 就与夹心的免疫复合物连接起来，而其它游离成分则通过洗涤被除去。最后加入显色剂，若样品中存在人 CEACAM-6，则会形成免疫复合物，其上连接的 HRP 会催化无色的显色剂氧化生成蓝色物质，而后加入终止液，最终产物呈黄色。通过酶标仪检测，读取 450 nm 处的 OD 值，人 CEACAM-6 浓度与 OD450 值之间呈正比，通过检测标准品绘制标准曲线，对照未知样品中 OD 值，即可计算出样品中人 CEACAM-6 的浓度。

背景简介

CEACAM-6(CEA 细胞黏附分子 6)，也称为 CD66c 或 NCA-50/90，是一种属于 CEA 家族的糖蛋白，主要通过糖鞘磷脂肌醇(GPI)锚定在细胞表面。该蛋白在多种细胞类型中表达，包括粒细胞和多个器官的上皮细胞。

CEACAM-6 能够介导同型结合 (与其他 CEA 家族成员结合) 和异型结合 (与整合素受体结合)，在组织结构的构建和信号转导的调控中发挥作用。CEACAM-6 的异常表达与多种人类恶性肿瘤的发生和发展有关。它通过调节细胞分化、抗凋亡、细胞生长和对治疗药物的耐药性来促进癌症的进展。例如，在多种癌症 (如乳腺癌、胰腺癌、结直肠癌和非小细胞肺癌) 中，CEACAM-6 的表达水平高于 CEACAM-5。CEACAM-6 在肿瘤的上皮 - 间质转化过程中发挥重要作用，这一过程使上皮细胞失去极性和细胞间黏附性，转变为具有侵袭性的间质细胞，并获得迁移能力。在多种癌症中，CEACAM-6 通过调节 EMT 相关信号通路 (如 PI3K/Akt 通路、ZEB1/ZEB2 通路) 促进肿瘤的侵袭和转移。CEACAM-6 在炎症性肠病 (如克罗恩病) 中也发挥重要作用。它作为黏附侵袭性大肠杆菌的受体，参与炎症反应。



产品内容

组分	体积或数量
人CEACAM-6预包被板	8孔条×12个
样品稀释液	30 mL
重组人CEACAM-6标准品(冻干)	2支(20 ng/支)
生物素标记人CEACAM-6抗体	130 μ L(效价1:100)
抗体稀释液	12 mL
酶复合物(HRP标记的链霉亲和素)	130 μ L(效价1:100)
酶复合物稀释液	12 mL
浓缩洗涤液(25×)	30 mL
显色剂TMB	10 mL
终止液	10 mL
封板胶纸	4张

操作步骤

样品制备

1. 根据样品种类选择相应的处理方法：

- 细胞上清：**将细胞培养上清液100~500×g离心5 min，去除悬浮物后即可；
- 血清样品：**将全血在室温下静置0.5~2 h，待其自然凝固并析出血清后，离心取黄色上清即可(4℃, 1,000~2,000×g, 10 min)，注意请勿吸取沉淀，制备好的血清需置于冰上待用，请勿在其中添加任何防腐剂或抗凝剂；
- 血浆样品：**使用EDTA对全血进行抗凝处理后，混合均匀置于冰上，离心取黄色上清即可(4℃, 1,000~2,000×g, 10 min)，注意请勿吸取沉淀，制备好的血浆需置于冰上待用；
- 组织匀浆/体液：**离心去除沉淀即可。

注意：① 若待测样品无法及时检测，样品制备完成后，请分装冻存于-20℃，避免反复冻融；
② 请保证待测样品清澈透明，检测前如发现样品中有悬浮物，需通过离心去除；
③ 为了保证检测结果准确，请勿使用溶血、黄疸、高血脂或污染的样品。

2. 稀释样品

查阅相关文献，预估样品中待测因子的含量，从而确定适当的稀释倍数，使稀释后样品中待测因子的浓度处于 ELISA 试剂盒的最佳检测范围。根据待测因子含量的不同，分别采取不同的稀释方案：

- 待测因子含量在 20~200 ng/mL 范围内，一般按 1:100 稀释，即向 297 μ L 样品稀释液中加入 3 μ L 样品；
- 待测因子含量在 2~20 ng/mL 范围内，一般按 1:10 稀释，即向 225 μ L 样品稀释液中加入 25 μ L 样品；
- 待测因子含量在 31.25~2,000 pg/mL 范围内，一般按 1:2 稀释，即向 100 μ L 样品稀释液中加入 100 μ L 样品；
- 待测因子含量 $\leq$ 31.25 pg/mL，样品一般无需稀释。

以上方案仅供参考，实验中请详细记录样品的稀释方法。



检测准备工作

3. 试剂盒自 4℃冰箱取出后,请置于室温平衡 20 min; 如从 -20℃取出,各组分需彻底融化后再平衡 20 min; 检测完成后,剩余试剂请及时置于 4℃或 -20℃保存;
4. 将 **浓缩洗涤液(25×)** 用双蒸水或去离子水稀释成1×洗涤液;
5. 重组人CEACAM-6标准品的稀释和使用(在使用前2 h内准备, 室温操作, **请严格控制在25~28℃**)
 - ① 配制 20 ng/mL 标准品: 取 1 mL 样品稀释液加入标准品管内,盖好后静置 15 min 以上,然后反复颠倒 / 搓动以助溶解;
 - ② 配制 2,000 pg/mL 标准品: 取 100 μ L 20 ng/mL 的标准品加入有 900 μ L 样品稀释液的 EP 管中,混匀,做上标记;
 - ③ 按下表将 2,000 pg/mL 标准品用样品稀释液进行倍比梯度稀释。(最高浓度为 2,000 pg/mL,将标准品稀释液作为浓度 0 pg/mL。)

管号	稀释液用量(μ L)	复溶后标准品用量(μ L)	标准品的最终浓度(pg/mL)
A	0	1,000	2,000
B	300	300(从A管中取)	1,000
C	300	300(从B管中取)	500
D	300	300(从C管中取)	250
E	300	300(从D管中取)	125
F	300	300(从E管中取)	62.5
G	300	300(从F管中取)	31.25
H	300	0	0

注意: 标准品复溶加样后, 剩余部分请丢弃。

6. 准备生物素标记人 CEACAM-6 抗体工作液
 - ① 按每孔需添加 100 μ L 抗体工作液,计算其总用量 (为弥补操作中的损耗,需多配制 100~200 μ L);
 - ② 按 1 μ L **生物素标记人 CEACAM-6 抗体** 添加 99 μ L **抗体稀释液** 的比例配制工作液,轻轻混匀。
7. 准备酶复合物工作液 (需在使用前 1 h 内准备)
 - ① 按每孔需添加 100 μ L 酶复合物工作液,计算其总用量 (为弥补操作中的损耗,需多配制 100~200 μ L);
 - ② 按 1 μ L **酶复合物** 添加 99 μ L **酶复合物稀释液** 的比例配制工作液,轻轻混匀。

检测流程

8. 通过计算确定一次实验所需的板条数, 取出所需板条放置于框架内, 多余的板条请放回铝箔袋密封, 保存于4℃或-20℃;
注意: ① **标准品和样品建议做双复孔检测;**
② **每次实验均需绘制标准曲线。**
9. 将用样品稀释液稀释后的样品和不同浓度标准品 (100 μ L/ 孔) 分别加入相应孔中,用封板胶纸封住反应孔,37℃孵育 90 min;
注意: ① **请查阅相关文献确定样品中待检测蛋白的大致浓度,若其大于本试剂盒标准曲线的最大标准品浓度,请将样品适当稀释后再进行检测;**
② **整个加样过程不宜超过 10 min,否则可能会影响检测结果。**
10. 甩去酶标板内液体,无需洗板,将板倒扣在吸水纸上拍干;
11. 加入稀释后的生物素标记人 CEACAM-6 抗体工作液 (100 μ L/ 孔),用封板胶纸封住反应孔,37℃孵育 60 min;

12. 洗板 5 次, 每孔 1× 洗涤液用量为 300 μ L, 注入与吸出间隔 15~30 s, 洗完后将板倒扣在吸水纸上拍干;
注意: 洗涤过程至关重要, 洗涤不充分会导致结果产生较大误差。
13. 加入稀释后的酶复合物 (100 μ L/ 孔), 用封板胶纸封住反应孔, 37°C 避光孵育 30 min;
14. 洗板 5 次, 方法同步骤 12;
15. 加入 显色剂 TMB (100 μ L/ 孔), 用封板胶纸封住反应孔, 避光 37°C 反应 10~25 min;
注意: ① 在保存和使用时, 请勿将 TMB 接触氧化剂和金属;
② 因实验室条件差异, 最佳显色时间会有所不同, 反应充分时肉眼可见标准品的前 3~4 孔有明显的梯度蓝色。
16. 加入 终止液 (100 μ L/ 孔), 混匀后即刻使用酶标仪测量 OD450, 同时设定 540 nm 或 570 nm 作为校正波长, 即可计算得到校正吸光度值 (OD450-OD540 或 OD450-OD570);
注意: 读取 OD 值建议在 10 min 内完成。


数据分析

17. 绘制标准曲线。以标准品浓度作横坐标, OD 值作纵坐标, 利用计算机软件作四参数逻辑 (4-PL) 曲线拟合创建标准曲线, 通过样品的 OD 值即可在标准曲线上计算出其相应浓度。
注意: ① 复孔 OD 值在 20% 的差异范围内结果才有效, 复孔 OD 值取平均后可作为测量值;
② 若样品 OD 值高于标准曲线上限, 应适当稀释后重测, 计算浓度时应乘以稀释倍数。

标准曲线范例

人CEACAM-6参考标准曲线

标准品浓度	O.D.
0 pg/mL	0.093
31.25 pg/mL	0.161
62.5 pg/mL	0.231
125 pg/mL	0.430
250 pg/mL	0.702
500 pg/mL	1.181
1,000 pg/mL	1.800
2,000 pg/mL	2.419

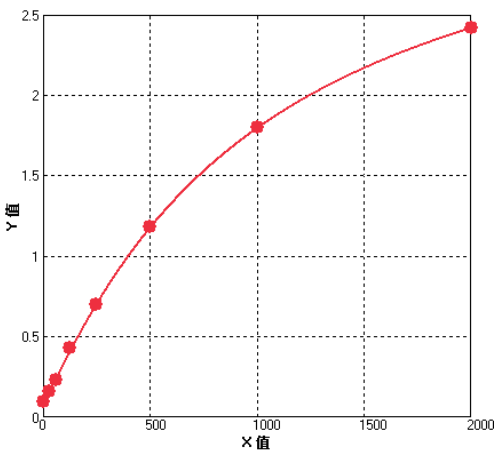

注意: 本图仅供参考, 应以同次试验标准品所绘标准曲线计算样品含量。

注意事项

1. 浓缩洗涤液 低温情况下可能会出现结晶, 请水浴加热使结晶完全溶解后再配制工作液;
2. 严禁混用不同批号试剂盒的组分;
3. 加样过程请避免产生气泡, 实验操作过程中一定要保证试剂充分混匀, 否则会使结果产生较大误差;
4. 说明书中提到的室温条件, 请严格控制在 25~28°C;
5. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作;
6. 本产品仅限科研使用。